


NUANCIER

0.0g/l < Taux < 0.5g/l



Tube

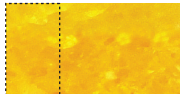

Taux $\geq$ 0.5g/l



Tube



Caractéristiques certifiées
selon la norme :
NFX 20-702:2014

- Aptitude à l'usage
- Qualités métrologiques

LNE - 1 rue Gaston Boissier
75015 Paris - FRANCE
www.marque-nf.com

Fabriqué par :
TURDUS TESTERS OF CAPACITY
770 Avenue de la Méridienne
48100 MARVEJOLS - FRANCE

1 ÉTHYLOTEST À USAGE UNIQUE




Terpan


SEUIL DE DETECTION
0.25mg/l d'air expiré
0.5g/l de sang



1 Tenir l'éthylotest et l'embout buccal pendant 30 secondes dans vos mains fermées.

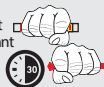

2 Mettre en service le test en perforant les opercules à l'aide de l'embout buccal.

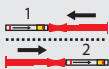

3 Insérer l'embout buccal sur l'éthylotest du côté de l'anneau rouge.

4 Inspirer profondément puis souffler lentement dans l'embout buccal en une seule fois dans le sens indiqué. **AVERTISSEMENT:** le souffle doit être continu et sans interruption.



5 Cesser de souffler dès que la couleur de pastille correspond à un des trois cas ci-contre.



Utilisation : 5°C à 40°C
Stockage : -20°C à 70°C

Distribué par Terpan

14, rue du Clos Hubert
28230 Gallardon - France
www.terpan.fr

Fabriqué par Turdus SA

770, avenue de la Méridienne
48100 Marvejols - France
www.turdus.fr

L'alcool est devenu la première cause d'accidents mortels sur la route



Pour une personne en bonne santé, le taux d'alcool descend de 0.1 à 0.15g/litre de sang par heure.

Effets de l'alcool :

Déformation du champ visuel
Altération des distances et obstacles
Diminution des réflexes et capacités
Sous-évaluation des risques et du danger

Faites le test avant de prendre le volant une heure après avoir bu votre dernier verre.
Interprétez le test selon le mode d'emploi.
Si le test se colore, vous êtes au dessus du seuil légal.



Terpan

Risques encourus hors récidive et circonstances aggravantes :
de 135 à 4 500€ d'amende, la perte de 6 points, une suspension ou annulation du permis de 3 ans maximum, l'immobilisation du véhicule ainsi qu'une peine de prison de 2 ans maximum.

Avant utilisation :
Attendre 10 min après la dernière ingestion d'alcool ou d'autres substances (spray, médicament...) avant d'effectuer un test.
L'alcoolémie maximale est atteinte 45 min à 60 min après le dernier verre d'alcool.

Interprétation :

1- Attendre que la pastille redevienne entièrement rouge. En présence d'alcool, le réactif se colore en vert.

2- Comparer la couleur obtenue à celles du nuancier fourni (sur le recto de cette notice) :

Si la couleur est comparable à celle indiquée dans le rectangle vert, vous pouvez conduire.

Si la couleur est comparable à celle indiquée dans le rectangle rouge, vous avez une alcoolémie supérieure au taux contraventionnel : NE PAS CONDUIRE

3- Au delà de 10 minutes, l'interprétation n'est plus possible

Les résultats de ce test ne peuvent en aucun cas être opposables à ceux obtenus par les forces de l'ordre, lors de contrôles officiels. Les décisions prises par l'utilisateur en fonction du résultat de ce test sont sous son entière responsabilité. Elles ne peuvent engager celle du fabricant et/ou de ses distributeurs.

Les éthylotests chimiques sont des indicateurs d'alcoolémie et non des instruments de mesure.

En cas de doute sur votre interprétation, nous vous conseillons de ne pas conduire.

Au delà de 0.5g d'alcool par litre de sang, les risques d'accident sont multipliés par 3.

Conduire après avoir consommé de l'alcool fait courir des risques extrêmes au conducteur, ses passagers et tous les usagers de la route.

Précautions :

Ce produit est un tube en verre donc fragile. **Tenir hors de la portée des enfants.** Ne pas utiliser le test si les membranes d'aluminium sont déjà perforées, si le verre est fêlé ou cassé, ou si le réactif est déjà vert. Ne pas diriger le test vers une personne pendant le soufflé. Ne pas inspirer. Ne pas avaler. En cas de contact du réactif avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau et demander si besoin un avis médical. En cas d'ingestion, appeler un service d'urgence médicale (par exemple le 15 ou le 112). A jeter dans une poubelle après utilisation en raison de la présence de produits chimiques contenus dans l'éthylotest.

L'utilisation non conforme à la notice et/ou le non-respect des précautions dégage le fabricant et ses distributeurs de toute responsabilité.